



IAT EXA インプラントシステムに
審美対応 アバットメントが新たに
追加されました。


チタンベースアバットメントは、インプラント CAD/CAM システムにてフリーデザインのインプラント上部構造を作製するための接着専用アバットメントです。ジルコニアや二ケイ酸リチウムなどのセラミックを接着することにより、より自然な色調再現が可能となります。また、セメント固定式、スクリュー固定式の補綴物に対応可能です。



チタンベースアバットメントの特徴

- 1 3つのカム機構により、コーピングやクラウンの正確な配置と回転防止
- 2 カム機構部はスキャニングを容易に行えるよう対応したR面形状
- 3 セメント維持を考慮したベース高さの設定


注意：高さの調整はカム機構の上端部まで切削可能ですが、セメント維持が低下することを考慮し調整を行ってください。

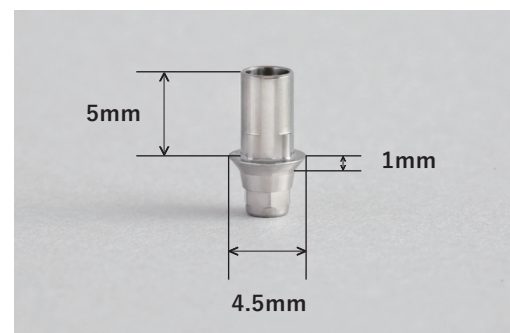

承認番号：20700BZZ00172000

作業手順例


STEP1 形態修正

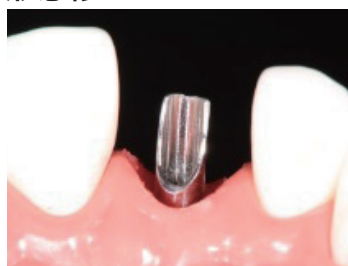


STEP2 フレームワックスアップ




STEP3 W スキャン

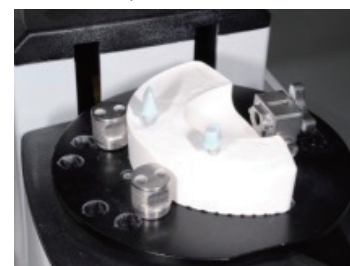


STEP4 CAD/CAM 加工

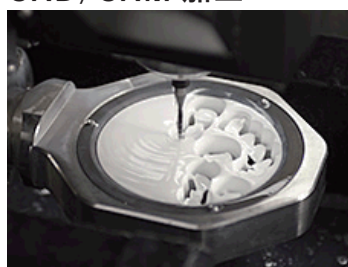

STEP5 ジルコニアアバットメント

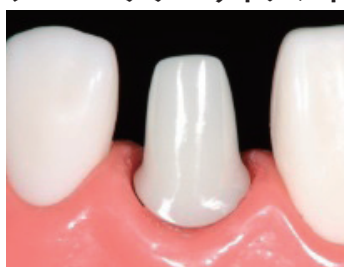

STEP6 完成

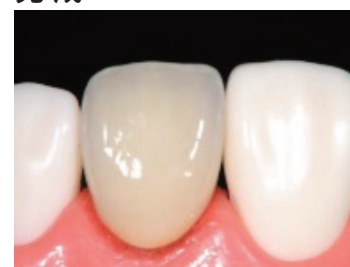

関連製品



ワックスアップスリーブ（樹脂製・金属製） ※写真は樹脂製となります。

CAD/CAMによるフリーデザインアバットメントを作製する際に使用するワックスアップ用スリーブです。模型上に装着しワックスアップを行いスキャンする事が可能です。

届出番号：09B1X10003000006

製造販売元

日本ピストンリング株式会社

新製品事業推進部 インプラントグループ 〒329-0114 栃木県下都賀郡野木町野木 1111
本社・営業 〒338-8503 埼玉県さいたま市中央区本町東五丁目 12 番 10 号

ご注文・お問い合わせ



0120-677-344



<http://www.npr.co.jp/>